


# XAIR Hybrid S7K

*En högkvalitativ decubitusterapi-sittdyna med skum & luftceller.*



- ✓ Nivå 4 - EPUAP
- ✓ 0 - 200 kg
- ✓ 3 års garanti
- ✓ Sittdynans höjd: 8 cm

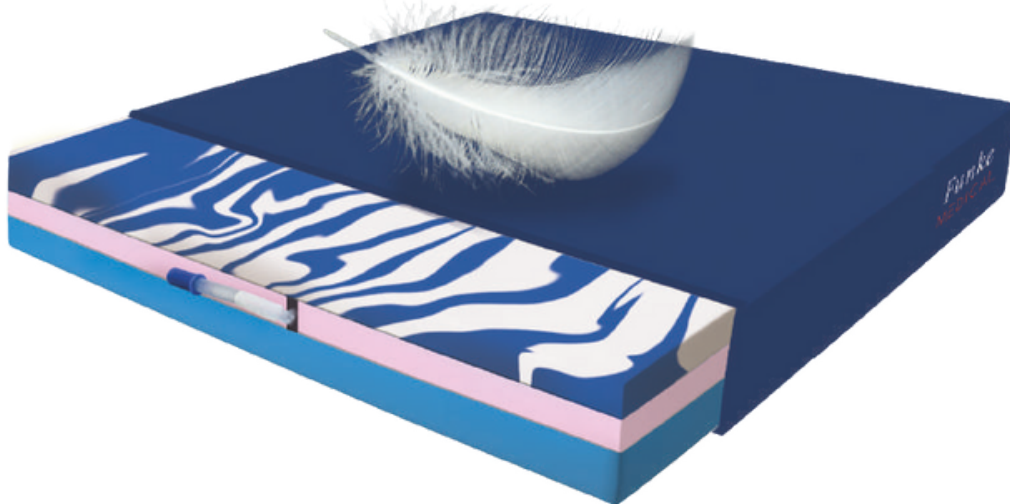

- SITTDYNA MED LUFTCELLER -

## Fördelar


- Mycket lättskött produkt som inte kräver någon rekonditionering.
- Tydlig märkning på både skumkärna och överdrag som förenklar hantering och minimerar risk för felaktig användning.
- Struktur och material som motverkar att brukaren glider framåt i dynan och som säkerställer en hög komfort.
- En undersida på överdraget som är tillverkat för att motverka att dynan glider i rullstolen.
- Ett optimalt mikroklimat och mycket god ventilation tack vare dynans material.
- Tydlig bruksanvisning som förenklar hantering för både brukare och personal.
- Ett mycket miljövänligt val tack vare en produktion som till största delen drivs av egenproducerad solenergi.
- Ett avtagbart och diskret överdrag i en mörk neutral färg.
- Struktur och material resulterar i ett optimalt förebyggande av trycksår.
- Stabil vid både stillasittande och aktivitet. Funke Medical är officiell sponsor till tyska landslaget i rullstolsbasket som använder dynorna när de spelar.

# XAIR Hybrid S7K

## Snabbguide - Justering av sittposition




Lyft skyddsöverdraget.

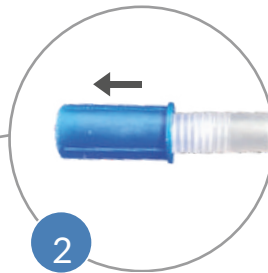

Öppna ventilen genom att dra i det blå låset och vänta ca. 30 sekunder, tills luftcellerna har blåsts upp automatiskt.


(Ventillocket kan inte ramla av.)

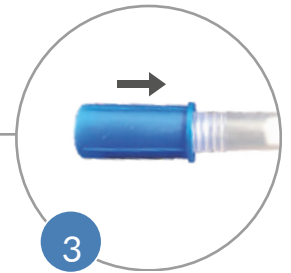

Stäng ventillocket genom att trycka in det blå locket.



Lägg sittdynan på rullstolen eller sätet.  
(Handtaget ska peka framåt och pilarna ska peka uppåt.)  
Sitt på sittdynan.

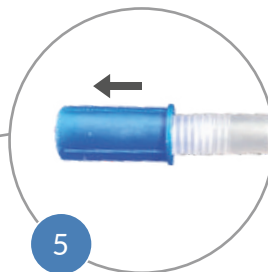


Öppna försiktigt ventilen igen tills den perfekta sittkomforten uppnås.



Stäng ventilen och skyddsöverdraget.

# XAIR Hybrid S7K


Detaljbild av skumkärnan och dess olika delar

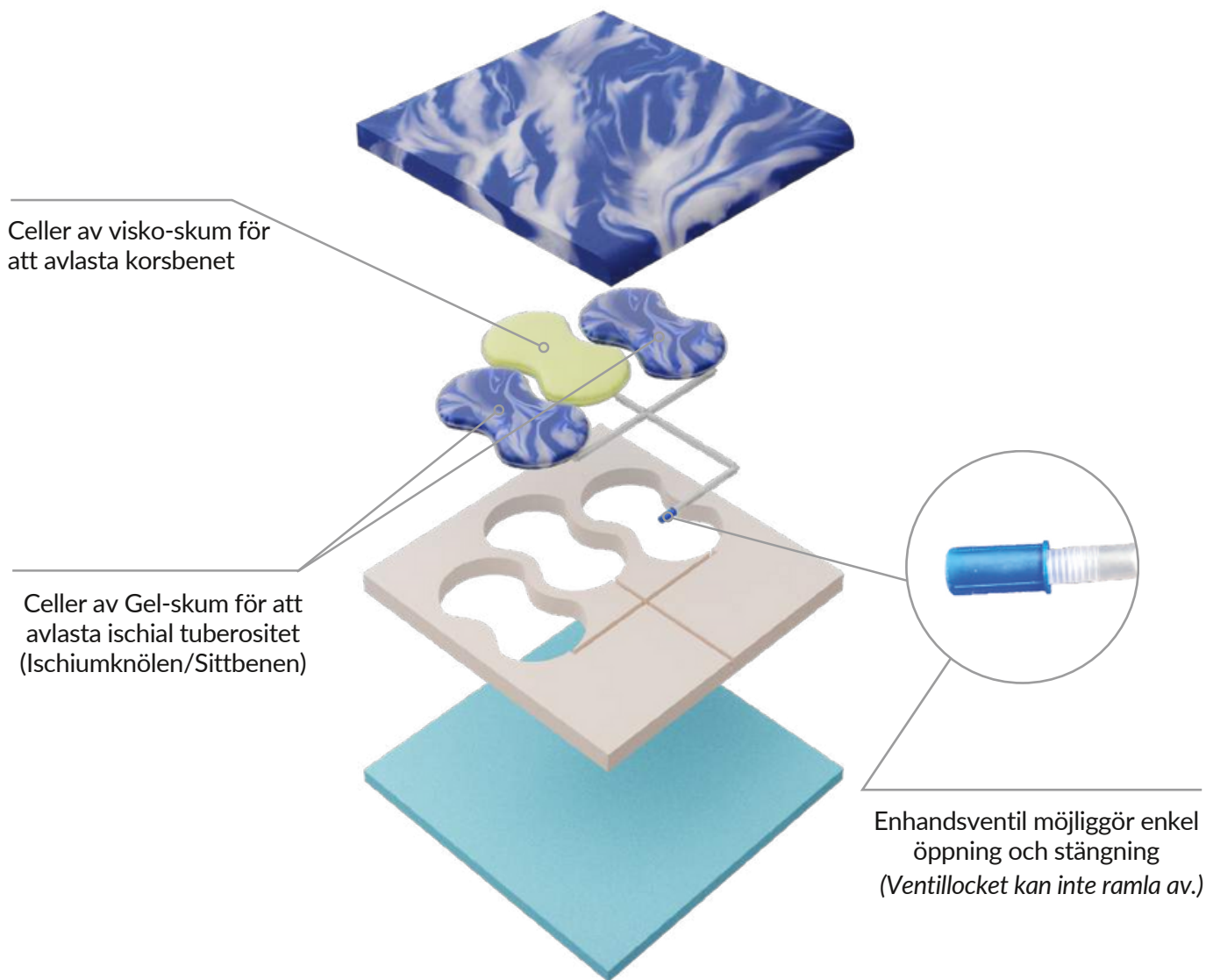

Celler av visko-skum för att avlasta korsbenet

Celler av Gel-skum för att avlasta ischial tuberositet (Ischiumknölen/Sittbenen)

Enhandsventil möjliggör enkel öppning och stängning (Ventillocket kan inte ramla av.)

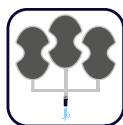

3-kammar-sittdyna som ger optimal tryckavlastning



Individuellt justerbar för perfekt sittkomfort



Ingen pump eller andra verktyg behövs.



Snabb och enkel anpassning till yttre tryckförhållanden



Ingen risk för fel tack vare självupplåsande FOAM-INCELL-TEKNIK



Väldigt lätt - 70 % lägre vikt än konventionella sittdynor med luftceller

## XAIR Hybrid S7K

XAIR Hybrid är en högkvalitativ sittdyna som placeras direkt på stolen. Dynan består av både skum och luft för att uppnå en individanpassad komfort och optimal tryckavlastning. Dynan passar för brukarvikter mellan 0 - 200 kg och har 3 års garanti. Sittdynan kan användas i alla vårdmiljöer och passar alla patienter med trycksår upp till och med kategori 4. Denna sittdyna tillverkas på ett **miljövänligt sätt** och har anpassats för att uppfylla i **Sverige** rådande krav kring säkerhet, kvalitet och hygien.



Funktioner och Egenskaper	Fakta om produkten
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryckavlastande (EPUAP nivå 4)</li><li>• Bi-elastiskt skydd för att minimera skjuvkrafter</li><li>• Ett luftgenomsläppligt överdrag</li><li>• Underhållsfri sittdyna</li><li>• Rengöring av skumkärna: Autoklavering samt desinficering enligt bruksanvisning</li><li>• Rengöring av överdrag: Tvättbar i tvättmaskin t.o.m 60 C Kemo-termisk rengöring möjlig Tål torktumling</li><li>• Garantitid: 3 år</li><li>• Övrigt: Inkontinensskydd tillgängligt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: Bottenplatta: HR-SKUM (Polyuretan) Mittenplatta: PU-skum med integrerade luftceller täckta av GEL-skum &amp; viskoskum Topplatta: GEL-skum (Polyuretan)</li><li>• Överdrag: Överdrag i mesh med glidsäker botten</li><li>• Tillgängliga storlekar: Bredd: 35 - 52 cm; Längd: 40 - 52 cm Höjd: 8 cm</li><li>• Brandsäkerhet: Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I + II BS 7175 sek 3 CRIB 5 BS 7177</li><li>• Hygien: Överdragsmaterialet är virus- och bakteriesäkert enligt ASTM 1670 + 1671</li></ul>

### Kontaktuppgifter:

Palliance AB  
Vasa Kyrkogata 1, 1TR  
41127 Göteborg

Tel: +46 8 28 75 00  
Mail: kundservice@palliance.se  
Web: www.palliance.se

### Digital utbildning



Funke Medical Academy

### Tillgänglig dokumentation

- Produktkatalog
- Bruksanvisningar
- Snabbguider för användare
- Sortimentsöversikter
- Teknisk dokumentation på förfrågan