


EVAQ PRO II GREENLINE

En högkvalitativ ersättningsmadrass för alla vårdmiljöer med en smidig **evakueringsfunktion** vid nödsituationer



- ✓ Nivå 4 - EPUAP
- ✓ 0 - 150 kg
- ✓ 7 års garanti
- ✓ Madrasshöjd: 15 cm

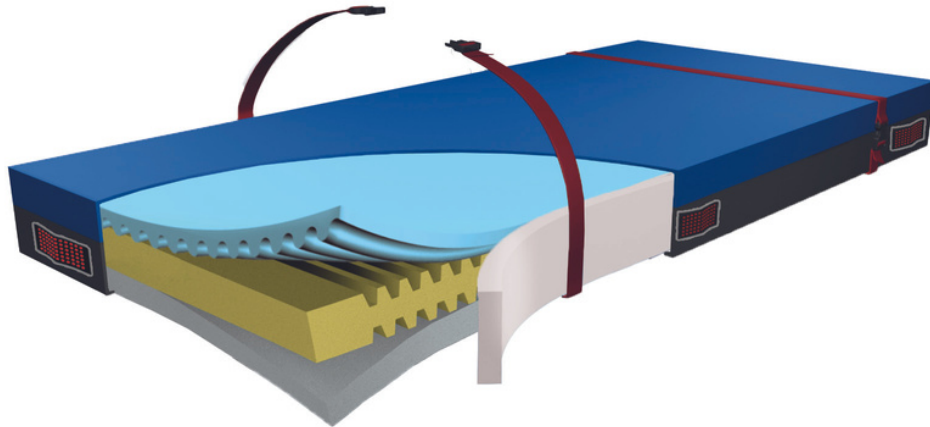

Fördelar

- Mycket lättskött produkt som inte kräver någon rekonditionering.
- Tydlig märkning på både skumkärna och överdrag som förenklar hantering och minimerar risk för felaktig användning.
- Struktur och material som förenklar för användaren att röra och vrida sig i sängen.
- Extra stabil madrasskant gör det smidigt och bekvämt för användaren att sätta sig på sängkanten.
- Tydlig bruksanvisning som förenklar hantering för både användare och personal.
- Ett mycket miljövänligt val med lägre CO - utsläpp samt längre hållbarhet tack vare GREENLINE-teknologin hos skummet.
- Mycket hög komfortnivå med ett diskret överdrag som dessutom tillåter enkelt förflyttning av brukar i säng.
- Madrassen är mycket smidig att hantera och sätta på plats tack vare en lätt vikt och enkla instruktioner.

EVAQ PRO II GREENLINE

EVAQ PRO II GREENLINE är en högkvalitativ ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten. Den kan hantera brukarvikter mellan 0 - 150 kg och har 7 års garanti. Madrassen kan användas i alla vårdmiljöer och passar alla patienter med trycksår upp till och med kategori 4. Denna madrassen tillverkas i ett **miljövänligt material** och har anpassats för att uppfylla i **Sverige** rådande krav kring säkerhet, kvalitet och hygien.

Evakueringsfunktion:

Vid nödsituationer är madrassen redo att användas för evakuering. Det krävs endast en person för att förflytta en brukare med hjälp av handtagen och den glidbara botten på madrassen. Beräknad evakueringstid är ca 60 sekunder/våning.

Evakueringsvideo:

www.youtube.com/watch?v=3T7ieXUkbgz



Funktioner och Egenskaper	Fakta om produkten
<ul style="list-style-type: none">• Tryckavlastande• Bi-elastiskt skydd för att minimera skjuvkrafter• Fasta madrasskanter som ger stabilitet• Underhållsfri madrass• Vattentät med ett andningsbart inkontinensöverdrag• Rengöring av skumkärna: Autoklivering eller rengöring med desinfektionsmedel• Rengöring av överdrag: Desinfektionsmedel, torkdesinfektion med klor eller kemo-termisk rengöring möjlig	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: PU-skum, kallsaum, 3 lager.• Överdrag: PU-belagd PES-bärrmaterial, nylon.• Tillgängliga storlekar: Bredd: 80 - 100 cm Längd: 190 - 220 cm• Brandsäkerhet: Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 CRIB 5, BS 7177• Garantitid: 7 år• Hygien: Överdragsmaterialet är virus- och bakteriesäkert enligt ASTM 1670 + 1671

Kontaktuppgifter:

Palliance AB
Vasa Kyrkogata 1, 1TR
41127 Göteborg

Tel: +46 8 28 75 00

Mail: kundservice@palliance.se

Web: www.palliance.se

Digital utbildning



Funke Medical Academy

Tillgänglig dokumentation

- Produktkatalog
- Bruksanvisningar
- Snabbguider för användare
- Sortimentsöversikt:
 - Madrasser
 - Positioneringshjälpmedel
 - Sittdynor